

Clearblue® PLUS

Tehotenský test

so ŠPIČKOU MENIACOU FARBU

- Clearblue® PLUS má vyššiu než 99% presnosť pri určovaní tehotenstva v deň očakávanej menštruácie
 - Clearblue® PLUS sa môže použiť už 5 dní dopredu
- Pred vykonaním testu si starostlivo preštudujte tento príbalový leták.

Predtým, ako začnete

Môže byť užitočné pripraviť si hodinky na sledovanie času počas testovania.

1 VYKONANIE TESTU

Pri testovaní v deň očakávanej menštruácie môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa.

Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou použite prvý ranný moč.

Keď ste pripravená na testovanie, vyberte testovaciu tyčinku z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.

TESTOVANIE ZO VZORKY MOČU

Moč sa môže testovať v prúde alebo sa môže testovať jeho vzorka odobratá do čistej, suchej nádoby.

- Špičku meniacou farbu nasmerovanú nadol vložte do prúdu moču alebo do



odobratej vzorky moču, ako je znázornené na obrázku, na celých **5 sekúnd**.

- Farba špičky meniacou farbu sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbovala moč. **Napriek zmene farby špičku meniacou farbu ponechajte v prúde alebo vo vzorke moču celých 5 sekúnd.**



Napriek zmene farby špičky meniacou farbu ponechajte v prúde alebo vo vzorke moču celých 5 sekúnd

5 sekúnd

Len čo sa farba špičky zmení na ružovú, začnite odrávať 5 sekúnd.

Prúd moču **ALEBO** Odobraná vzorka

- Špičku meniacou farbu držte nasmerovanú nadol alebo testovaciu tyčinku položte do vodorovnej polohy, až pokiaľ sa v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara a nebudete si môcť pozrieť výsledok.
- Kryt môžete vrátiť na pôvodné miesto.

Ak sa špička meniacou farbu nesfarbí celá na ružovo, prejdite na otázku 7.



POČKAJTE 3 MINÚTY.

Keď sa začne objavovať modrá čiara/čiary, znamená to, že test začína pracovať.


3 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU

Teraz môžete odčítať výsledok v okienku s výsledkom.

Pri odčítaní výsledku sa v kontrolnom okienku musí zobrazovať modrá čiara. Táto čiara znamená, že test prebehol úspešne.

Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť už za 1 minútu pri testovaní v deň očakávanej menštruácie (t. j. v deň keď ste mali dostať menštruáciu, ale nedostali ste ju). Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali dopredu (prejdite na otázku 10).

Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne (prejdite na otázku 7).

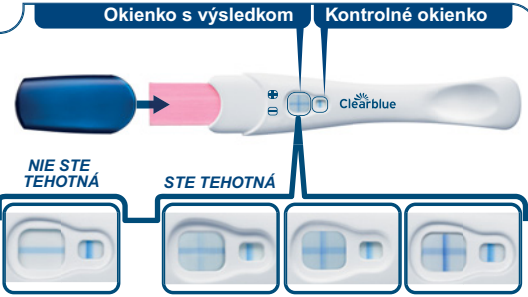

NIE STE TEHOTNÁ

Ak test označuje, že nie ste tehotná, prejdite na otázku 12 v časti Otázky a odpovede.

STE TEHOTNÁ

Ak test označuje, že ste tehotná, prejdite na otázku 13 v časti Otázky a odpovede.

Test označuje, že ste tehotná, aj v tom prípade, že čiary tvoria symbol „+“ nie sú rovnako tmavé.

DÔLEŽITÉ!

Výsledok odčítajte do 10 minút po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času neberte do úvahy.

Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku testu, prejdite na otázku 8, kde nájdete podrobnejšie informácie.

Otázky a odpovede – V nasledujúcej časti si prečítajte odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Otázky a odpovede

- Nakoľko je tehotenský test Clearblue® PLUS presný?**
Clearblue® PLUS dosahuje v laboratórnych testoch presnosť viac ako 99% pri testovaní v deň očakávanej menštruácie.
- Ako Clearblue® PLUS funguje?**
V tehotenstve ľudské telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský chorionogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu tehotenstva. Clearblue® PLUS dokáže v moči odhaliť už drobné množstvo tohto hormónu (citlivosť testu je 25 mIU/ml).
- Kedy môžem použiť test Clearblue® PLUS?**
Clearblue® PLUS sa môže použiť najskôr 5 dní dopredu (teda 4 dni pred očakávanou menštruáciou). Ak test vykonáte pred očakávanou menštruáciou sa výsledok bude negatívny, stále je tu možnosť, že ste tehotná. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku s výsledkami klinického testovania Clearblue® PLUS počas počiatkových štádií tehotenstva.

Prilíš skoré testovanie	
Počet dní pred očakávanou menštruáciou	Percento vzoriek tehotných žien, ktorým vyšiel pozitívny test
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

- Musím použiť vzorku prvého ranného moču?**
Ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, odporúčame vám použiť prvý ranný moč. Inak môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa. Pred testovaním neprijímajte príliš veľa tekutín.
- Neviem, kedy mám dostať najbližšiu menštruáciu. Ako zistím, či vykonávam test v správnom čase?**
Na určenie dňa očakávanej menštruácie vypočítajte dĺžku vášho cyklu tak, že spočítate počet dní od začiatku menštruácie až po deň pred začiatkom ďalšej menštruácie.
 - Ak máte nepravidelý cyklus, mali by ste brať do úvahy najdlhší cyklus za posledné mesiace.
 - Ak si deň očakávanej menštruácie nedokážete vypočítať, odporúčame vám vykonať test najskôr 19 dní po nechránenom pohlavnom styku.
 - Ak test označuje, že nie ste tehotná, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste, prejdite na otázku 13.
- Mohli nejaké lieky alebo váš zdravotný stav ovplyvniť výsledky testu?**
 - Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.
 - Lieky vplývajúce na plodnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa zvyčajne podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže mať za následok nesprávne určenie tehotenstva).
 - Iné terapie plodnosti, ako napr. klomifénitrát, lieky proti bolesti a hormonálna antikoncepcia (napr. antikoncepčné tabletky), by na výsledok testu nemali mať žiadny vplyv.
 - Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak užívate klomifénitrát či iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, váš cyklus môže byť nepravdivý a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
 - Ak ste boli nedávno tehotná (aj v prípade nedonosenia), test môže nesprávne určiť, že ste tehotná.

- Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vajčinkách, menopauza a iné veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.
 - Ak test preukáže, že ste tehotná, a vy neskôr zistíte, že nie ste, môže ísť o prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva.
- Použila som tehotenský test, ale špička meniacou farbu sa nesfarbila celá na ružovo. Čo mám robiť?**
Ak sa nesfarbila celá špička meniacou farbu, je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, prejdite na otázku 8.
 - Použila som tehotenský test, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?**
Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:
 - Po aplikácii moču nebola špička meniacou farbu nasmerovaná nadol alebo testovacia tyčinka nebola položená do vodorovnej polohy.
 - Aplikoval sa príliš veľa alebo príliš málo moču. Je potrebné podržať špičku v moči 5 sekúnd.
 Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dajte pritom na dodržanie pokynov. Môžete odobrať vzorku moču do čistej, suchej nádoby a len do nej na 5 sekúnd vložiť špičku meniacou farbu.
 - Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?**
 - Test označuje, že ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „+“.
 Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podob, avšak čiary, ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku by mali mať podobnú hrúbku (pozri obrázky A – C).

Obrázok A

Toto znamená, že ste tehotná. Toto sa môže stať, najmä ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, kedy je množstvo hormónu hCG relatívne nízke.

Obrázok B

Takáto situácia môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG pomerne nízka.

IVD	In vitro diagnostický zdravotnícky prostriedok	LOT	Číslo šarže		Nepoužívať opakovane
	Teplotné obmedzenie 2–30 °C		Dátum najneskoršej potreby		Výrobca
Dátum poslednej revízie textu: 02/2015				Prečítajte si návod na použitie	

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajčiarsko.
Clearblue je ochranná známka spoločnosti SPD. Vyrobené v Číne.
© 2015 SPD. Všetky práva vyhradené.

Distibúcia v SR: Glynn Brothers Chemicals Slovakia spol., s r.o.

Obrázok C

Toto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní v deň očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia. Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dajte pritom na dodržanie pokynov.

- Test označuje, že nie ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „–“ (minus). Ak je výsledok testu negatívny, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste tehotná, prejdite na otázku 13.
- Čo mohlo ovplyvniť presnosť výsledku?**
Presnosť tehotenského testu Clearblue® PLUS je nižšia, ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie. Ak vzorku moču netestujete tak dlho, ako určujú pokyny, môžete dostať nesprávny výsledok. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút objaví modrá čiara, znamená to, že výsledok testu je správny. Ak test opakovane ukazuje nečakané výsledky, konzultujte to so svojim lekárom. Takisto prejdite na otázku 6.
 - Kedy môžem interpretovať výsledok?**
Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť už za 1 minútu pri testovaní v deň očakávanej menštruácie (t. j. po dni, keď ste mali dostať menštruáciu, ale nedostali ste ju). Pred interpretáciou výsledku sa presvedčte, či sa v kontrolnom okienku zobrazí modrá čiara. Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali dopredu. Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, test neprebehol úspešne (prejdite na otázku 8).
 - Ako dlho je výsledok v okienku s výsledkom platný?**
Výsledok je platný od 3 do 10 minút od vykonania testu. Po uplynutí 10 minút nemusí byť výsledok testu pravdivý.
 - Test označuje, že nie som tehotná. Čo mám robiť?**
Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo hormónu hCG príliš malé na to, aby sa dal zistiť, alebo ste si zle vypočítala deň očakávanej menštruácie.
 - Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie.
 - Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak test preukáže, že nie ste tehotná, a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.
 - Test označuje, že som tehotná. Čo mám robiť?**
Ak tento test potvrdí tehotenstvo, je vhodné navštíviť lekára, ktorý vám poradí, ako ďalšie kroky je potrebné vykonať.

Ďalšie kroky, informácie a všeobecné rady týkajúce sa tehotenstva nájdete na našej webovej stránke:

www.clearblue.com

Tento prostriedok je určený na domáce testovanie. Skladujte pri izbovej teplote.

Ak test skladujete v chladničke, pred použitím ho vyberte a počkajte minimálne 30 minút, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Iba na diagnostické použitie in vitro.

Zlikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Nepoužívajte, ak je fóliový obal poškodený.

Nepoužívajte testovaciu tyčinku po uplynutí dátumu expirácie.



0843