

A Clearblue Digital ovulációs teszt használata

A teszt a luteinizáló hormon (LH) szintjének megemelkedését (csúcsát) mutatja ki a vizeletből. Az LH csúcs körülbelül 24–36 órával azelőtt jelentkezik, hogy egy petesejt kiszabadul a petefészekből: ez a folyamat a tüszőrepedés, azaz **ovuláció**. Ön az LH-csúcs kimutatásának napján és az azt követő napon a legtermékenyebb.

Az Ön 2 legtermékenyebb napja az LH-csúcs kimutatásának időpontjától indul. Ebben a 48 órában a legnagyobb az esélye annak, hogy szexuális együttlét után teherbe esik.

Ha úgy kívánja elkezdni a tesztelést, hogy nem ismeri a havi ciklusa hosszát, akkor a tesztelés elkezdéséhez a 10. napot javasoljuk. Így azonban elképzelhető, hogy lemarad az LH-csúcsról, mert lehet, hogy túl korán vagy túl későn kezdte a tesztelést.

A tesztelés kezdeti napjának meghatározásához használja az alábbi táblázatot. A tesztelést bármely napszakban elvégezhető, de minden nap ugyanabban a napszakban kell elvégezni (sok nő számára kézenfekvő reggel ezzel indítani a napot). Fontos, hogy a tesztelést megelőző 4 órában ne legyen vizeletürítés, és tesztelés előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.

A havi ciklusa hossza (nap)	21 vagy kevesebb	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 vagy több
A havi ciklusának kezdeti napját az 1. napnak számolva kezdje el a tesztelést a havi ciklusának hossza alatt feltüntetett napon.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Lásd az 1. kérdést.

1 Amikor készen áll a teszt elvégzésére...

- Távolítsa el a tesztcsíkot a csomagolófóliából. Azonnal használja fel.
- Mielőtt vizelet éri a tesztcsíkot, **fontos**, hogy behelyezze azt a tesztcsiktartóba. Kövesse az alábbi lépéseket.



2 Távolítsa el a kupakot.

- Keresse meg a tesztcsíkon a rózsaszín nyilat.



3 Állítsa össze a tesztet.


- Keresse meg a tesztcsíktartón a rózsaszín nyilat.
- Állítsa a nyilakat egy vonalra.
- Helyezze a tesztcsíkot a tesztcsíktartóba, amíg a helyére nem kattán, és meg nem jelenik a „teszt kész” szimbólum.
- Ne használja, amíg** a „teszt kész” szimbólum meg nem jelenik.
- Amikor a „teszt kész” szimbólum megjelenik, azonnal végezze el a tesztet.
- Ha nem jelenik meg a „teszt kész” szimbólum, VAGY ha a szimbólum eltűnik, távolítsa el a tesztcsíkot a kiadás gombbal, és óvatosan helyezze vissza.
- Ha a szimbólum így sem jelenik meg, lásd a 12. kérdést.



4 Végezze el a tesztet.

Amikor a „teszt kész” szimbólum megjelent a kijelzőn...

- Akár** közvetlenül a vizeletsugárban is végezheti a tesztet.
- Tartsa csak a nedvszívó mintavevőt **lefelé mutató helyzetben** a vizeletsugárba 5–7 másodpercig.
- Ügyeljen arra, hogy a tesztcsíktartó ne legyen nedves.

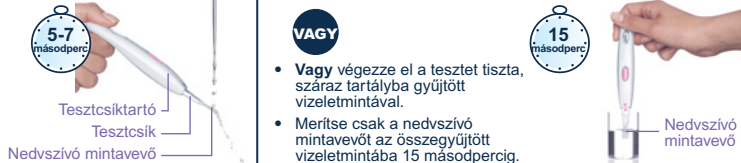

5 Várjon.

- Tartsa a nedvszívó mintavevőt lefelé mutató helyzetben, vagy fektesse le a tesztet egy lapos felületre. A teszt elvégzése alatt soha ne tartsa a nedvszívó mintavevőt felfelé mutató helyzetben.
- A „teszt kész” szimbólum 20–40 másodperc után villogni kezd jelezve, hogy a teszt működékes.

- NE TÁVOLÍTSA EL A TESZTCSÍKOT.**
- Helyezze vissza a kupakot, majd törölje le a felesleges vizeletet.
- Ha a „teszt kész” szimbólum nem kezd villogni, lásd a 3. kérdést a hátoldalon.



6 Tekintse meg az eredményt.

- Az eredmény 3 percen belül megjelenik a kijelzőn.
- Az eredmény leolvása után **FONTOS**, hogy a kiadás gomb megnyomásával eltávolítsa a tesztcsíkot. A teszt eredménye csak a tesztcsíktartó kijelzőjén olvasható le.
- Az eredmény a tesztcsíkon látható vonalakból nem állapítható meg.



Ha az eredmény nem sikerült LH-csúcsot kimutatni. Ismételje meg másnap a tesztet egy új tesztcsíkkal.



Ha az eredmény , akkor sikerült az LH-csúcsot kimutatni, és Ön elérte a legtermékenyebb időszakot. Az elkövetkező 48 órában a legnagyobb az esélye annak, hogy szexuális együttlét után teherbe esik. Ebben a havi ciklusban nincs szükség további tesztelésre.

- Az eredmény 8 percig látható a kijelzőn.
- Ha a tesztcsík még a tartóban van, és a kijelző üres, távolítsa el a tesztcsíkot, és az eredmény 2 percig ismét megjelenik.
- A használt tesztcsíkot ne helyezze vissza.
- A tesztcsíkot dobja normál háztartási hulladékká.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A tesztcsíktartó kidobása

Ha már nem használja többet a tesztcsíktartót, válassza szét a tartó felső és alsó részét a kijelző felőli oldalon, és távolítsa el az elemeket. Távolítsa el az összes elemet a központi fémfedél alól. Elvezetéseket a megfelelő újrahasznosítási eljárások szerint dobja ki. Figyelem! Az elemeket ne szedje szét, ne töltsé újra, és ne dobja tűzbe. Ne nyelje le. Gyermekektől elzárva tartandó. A tesztcsíktartó többi részét az elektronikai berendezésekre vonatkozó újrahasznosítási eljárások szerint dobja ki. Az elektronikai berendezést ne dobja tűzbe.

A tesztcsíktartó ismételt használata

Ha a tesztcsíktartóra használat közben folyadék kerül, gondosan törölje le. További tesztet nem lehet elvégezni, amíg a kijelzőn az eredmény vagy hibaszimbólumok láthatók. Ezek 8 percre jelennek meg (vagy 2 percre, ha a kijelző üres volt, és a tesztcsíkot éppen eltávolította). Ha vizeletmintát gyűjtött, akkor a tesztcsíktartó rögtön újra használható, amint a kijelző megüresedik. Amikor készen áll a tesztcsíktartó ismételt használatára, kövesse az utasításokat az 1. lépéstől egy új tesztcsík használatával.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

1 A havi ciklusom hosszabb 40 napnál. Mikor kezdjem a tesztelést?

Ha a havi ciklusa hosszabb 40 napnál, akkor kezdje a tesztelést 17 nappal a következő menstruáció esedékessége előtt.

2 Az összes tesztet el kell használnom?

Nem. Az LH-csúcs kimutatása után befejezheti a tesztelést, és megőrizheti a megmaradt tesztcsíkokat és a tesztcsíktartót, amelyeket szükség esetén a következő havi ciklusa során felhasználhat.

3 Elvégeztem a tesztet, de a „teszt kész” szimbólum nem kezdett el villogni. Ez mit jelent?

A tesztet nem végezte pontosan. A tesztelés első 10 percében megjelenik egy hibaszimbólum. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsík használatával. Lásd a 10. kérdést és „A tesztcsíktartó ismételt használata” részt.

4 Elvégeztem a tesztet, de nem jelenik meg az eredmény. Ez mit jelent?

Az eredménynek a teszt elvégzésének első 3 percében meg kell jelennie. Ha nem jelenik meg az eredmény, 10 percen belül megjelenik egy hibaszimbólum. Lásd a 10. kérdést.

5 Mennyire megbízható a Clearblue Digital ovulációs teszt?

Széleskörű laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a teszt 99% feletti megbízhatósággal mutatja ki az LH-csúcsot. A teszt érzékenysége 40 mIU/ml.

6 Még nem sikerült kimutatni az LH-csúcsot. Mit kell tennem?

Ha a havi ciklusa 3 napnál nagyobb eltéréseket mutat, akkor elképzelhető, hogy az LH-csúcsot csak több tesztel sikerül kimutatni. Az is lehetséges, hogy ebben a ciklusban elmaradt az ovuláció. Ez nem szokatlan, ám javasoljuk, hogy keresse fel orvosát, ha 3 egymást követő havi ciklus során nem tapasztal LH-csúcsot.

7 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?

A teszt elvégzése előtt mindig olvassa el az aktuálisan szedett gyógyszerek gyártóinak utasításait.

Bizonyos betegségek és gyógyszerek károsan befolyásolhatják a tesztet: Ha Ön például terhes, nemrég volt terhes, elérte a menopauzát, vagy policisztás petefészek-betegségben szenved, akkor téves eredményt kaphat. Ugyancsak téves eredményhez vezethet, ha luteinizáló hormont vagy humán choriongonadotropint tartalmazó termékenységet fokozó gyógyszert szed. Kérjük, konzultáljon orvosával.

A klomifén-citrát nem befolyásolja a tesztet, ám befolyásolhatja a havi ciklusának hosszát, így a tesztelés időszakát is. Elképzelhető, hogy a tesztelés folytatásához új dobozra és új tesztcsíktartóra, illetve tesztcsíkokra lesz szükség.

Ha nemrég fejtezte be hormonális fogamzásgátló szer használatát, a havi ciklusa szabálytalaná válhat, így érdemes 2 havi ciklussal elhalasztani a tesztelést.

8 Több hónapja használok a Clearblue Digital ovulációs tesztet, mégsem estem teherbe. Hogyan lehetek biztos abban, hogy teherbe estem?

Több hónapja is telhet, amíg teherbe esik. A terhesség elmaradásának számos oka lehet még akkor is, ha Ön a legtermékenyebb időszakban létesített szexuális kapcsolatot.

Ha Ön még 35 év alatti, és 12 hónap próbálkozás után sem esett teherbe, javasoljuk, hogy keresse fel orvosát. Ha Ön 35 év feletti, akkor 6 hónap eredménytelen próbálkozás után keresse fel orvosát, és ha 40 év feletti, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

HIBAÜZENETEK

9 A kijelzőn egy villogó szimbólum (A hiba) jelent meg. Ez mit jelent?

A tesztcsík túl korán lett eltávolítva. Ha nem sikerül elég gyorsan visszahelyezni, egy újabb hibaszimbólum jelenik meg. Lásd a 10. kérdést.

10 A kijelzőn ez a szimbólum (B hiba) jelent meg. Ez mit jelent?

A tesztelés során hiba történt. Elképzelhető, hogy:

- Vizelet került a nedvszívó mintavevőre még azelőtt, hogy a tesztcsík a tesztcsíktartóba került.
- A nedvszívó mintavevő nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve.
- A vizelet túl sok vagy túl kevés volt.
- A tesztcsík túl korán lett eltávolítva.

Ez a szimbólum 8 percen keresztül jelenik meg. Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az utasításokat. Olvassa el „A tesztcsíktartó ismételt használata” részt.

11 A kijelzőn ez a szimbólum (C hiba) jelent meg. Ez mit jelent?

A teszt nem az elvárásoknak megfelelően működött. Ennek egyik oka az lehet, hogy a használati utasítás nem tartották be. Ha maradt fel nem használt tesztcsík a csomagban, ne használja azokat ezzel a tesztcsíktartóval. Újabb tesztet kell elvégeznie egy új csomaggal. Kérjük, gondosan tartsa be a használati utasításokat.

12 A kijelző üres maradt. Ez mit jelent?

A teszt nem az elvárásoknak megfelelően működött. Ennek egyik oka az lehet, hogy a használati utasítás nem tartották be, vagy a tesztcsíktartó túl nedves lett. Ha még nem került vizelet a tesztcsíkra, távolítsa el a tartóból, és kezdje újra a tesztelést. Ha a kijelző továbbra is üres marad, akkor ki kell cserélni.

www.clearblue.com

Csak Clearblue Digital ovulációs tesztcsíkokat használjon ezzel a tesztcsíktartóval. Otthoni ovulációs teszt. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai felhasználásra. Szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne használja, ha a tesztcsík fóliacsomagolása sérült. Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot. A tesztcsíkokat ne használja újra. Nem használható fogamzásgátlásra. Ez a használati utasítás az 505121/H számú SPD modellhez készült.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Svájc.

© 2015 SPD. Minden jog fenntartva!

A Clearblue az SPD vállalat védjegye.

Gyártás helye: Kína.

Forgalmazó: ADPH Kft, H-1085 Budapest, Kőlcsey u. 4. /3/, Magyarország



IVD	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz	LOT	Gyártási szám	Gyártja
	Hőmérséklet-tartomány: 2–30 °C		Lejárat dátum	Olvassa el a használati utasítást.

Hibaszimbólumok

Hiba esetén megjelenik egy szimbólum. Lásd a „Hibaüzenetek” részt.

Jak ovulační test Clearblue Digital funguje

Test funguje tak, že zjistí nárůst (prudké zvýšení) hladiny luteinizačního hormonu (LH) v moči. Prudké zvýšení hladiny LH nastává přibližně 24–36 hodin před uvolněním vajíčka z vaječniku – což je proces známý jako **ovulace**. Vaše nejpłodnější období připadá na den, kdy zjistíte prudké zvýšení hladiny LH, a den poté

Vaše 2 nejpłodnější dny začínají okamžikem, kdy je zjištěno prudké zvýšení hladiny LH. Milujte se kdykoli během těchto 48 hodin, aby se maximalizovala šance, že otěhotníte.

Jestliže chcete zahájit testování, aniž byste znala délku svého cyklu, doporučujeme Vám zahájit testování 10. dne. Mohla byste však propást prudké zvýšení hladiny LH, protože jste testování zahájila příliš brzy nebo příliš pozdě.

Pro výpočet dne, kdy byste měla zahájit testování, použijte níže uvedenou tabulku. Test můžete provádět kdykoli během dne, ale mělo by to být každý den v přibližně stejnou dobu (mnoho žen považuje za nejpohodlnější udělat test jako první věc ráno). Je důležité, abyste minimálně 4 hodiny před testováním nemočila, a před prováděním testu byste se měla vyvarovat nadměrného příjmu tekutin.

Délka cyklu (dny)	21 nebo méně	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 nebo více
Počítejte první den své menstruace jako den 1 a začněte testování v den uvedený pod délkou cyklu.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Viz otázka 1.

1 Když jste připravena na testování...

- Vyjměte testovací tyčinku z fóliového obalu. Tyčinku okamžitě použijte.
- Před aplikací moči na testovací tyčinku je **nutné** vložit tyčinku do držáku testu. Postupujte podle níže uvedených kroků.




2 Odstraňte kryt

- Vyhleďte na testovací tyčince růžovou šipku.



3 Sestavení testu


- Vyhleďte na držáku testu růžovou šipku.
- Zarovnejte obě růžové šipky.
- Vložte testovací tyčinku do držáku testu, dokud nezaklapne na místo a nezobrazí se symbol připravenosti k testování.
- Tyčinku nepoužívejte, dokud se neobjeví symbol připravenosti k testování.** Jakmile se symbol připravenosti k testování objeví, ihned proveďte test.
- Pokud se symbol připravenosti k testování neobjeví NEBO pokud zmizí, vysuňte testovací tyčinku a znovu ji opatrně vložte.
- Pokud se symbol stále neobjevuje, viz otázka 12.

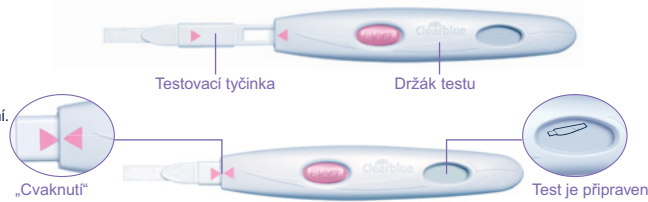

4 Proveďte test

Pokud se na displeji zobrazuje symbol připravenosti k testování...

- Bud'** testujte přímo v proudu moči.
- Přidrte absorpční tyčinku v poloze **směrem dolů** v proudu moči po dobu 5–7 sekund.
- Dávejte pozor, aby nezvlhl držák testu.

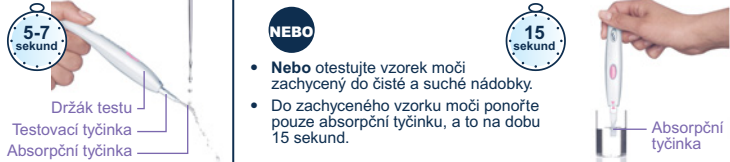

5 Vyčkejte

- Udržujte absorpční tyčinku v takové poloze, aby směřovala dolů, nebo test položte do vodorovné polohy. Po celou dobu testování nikdy nadržte test absorpční tyčinkou směrem nahoru.
- Symbol připravenosti k testování začne po 20–40 sekundách blikat, to znamená, že test probíhá.

- NEVYSUNUJTE TESTOVACÍ TYČINKU.**
- Nasaďte kryt zpět a otřete přebytečnou moč.
- Pokud symbol připravenosti k testování nezačal blikat, viz otázka 3 na druhé straně.



6 Podívejte se na výsledek

- Pokud je výsledek nebylo zjištěno prudké zvýšení hladiny LH. Opakujte test následující den ve stejnou dobu s novou testovací tyčinkou.
- Pokud je výsledek bylo zjištěno prudké zvýšení hladiny LH a dosáhla jste nejpłodnějšího období. Milujte se kdykoli během příštích 48 hodin, aby se maximalizovala šance, že otěhotníte. Během tohoto cyklu není třeba provádět další testování.

- Výsledek zůstane na displeji po dobu 8 minut.
- Pokud je testovací tyčinka stále ještě vložená a displej je nyní prázdný, vysuňte testovací tyčinku a znovu ji do 2 minut znovu objeví.
- Nevkládejte znovu již použitou testovací tyčinku.
- Testovací tyčinku zlikvidujte s normálním domovním odpadem.

- Na displeji se během 3 minut zobrazí výsledek.
- Po odečtení výsledku **MUSÍTE** stisknout tlačítko pro vysunutí a vyjmout testovací tyčinku. Výsledek testu lze odečíst pouze na displeji držáku testu.
- Výsledek nelze určit na základě jakýchkoli čárek, které uvidíte na testovací tyčince.

DALŠÍ INFORMACE

Likvidace držáku testu

Až ukončíte používání držáku testu, vyjměte všechny baterie oddělením jeho horní a dolní poloviny tak, že začnete na konci u displeje. Vyjměte všechny baterie zpod středního kovového krytu. Baterie zlikvidujte podle příslušného recyklačního postupu. Pozor: Baterie nerozebírejte, nedobíjejte ani neodhazujte do ohně. Zabraňte spolknutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zlikvidujte zbytek držáku podle příslušného recyklačního postupu pro elektrická zařízení. Nevhazujte elektrická zařízení do ohně.

Opakované použití držáku testu

Dojde-li během testování k postřikání držáku testu, utřete jej do sucha. Další test není možný, pokud je na displeji výsledek nebo jakékoli chybové symboly. Budou se zobrazovat po dobu 8 minut (nebo 2 minut v případě, že displej byl prázdný a právě jste vysunula testovací tyčinku). Pokud jste odebrala vzorek moči, můžete držák testu znovu použít, jakmile bude displej prázdný. Až budete připravena znovu použít držák testu, opakujte pokyny od kroku 1 s novou testovací tyčinkou.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1 Můj cyklus je delší než 40 dní. Kdy bych měla zahájit testování?

Pokud je Váš cyklus delší než 40 dní, začněte testování 17 dní před očekávanou další menstruací.

2 Musím použít všechny testy?

Ne. Testování můžete zastavit, jakmile zjistíte prudké zvýšení hladiny LH, a uschovat si zbývající testovací tyčinky a držák testu pro případné použití v dalším cyklu.

3 Udělala jsem si test, ale symbol připravenosti k testování nezačal blikat. Co to znamená?

Test nebyl správně proveden. Do 10 minut od začátku testování se objeví chybový symbol. Test byste měla zopakovat s novou testovací tyčinkou. Viz otázka 10 a část „Opakované použití držáku testu“.

4 Udělala jsem si test, ale neobjevil se žádný výsledek. Co to znamená?

Výsledek by se na displeji měl objevit do 3 minut od provedení testu. Pokud se neobjeví žádný výsledek, do 10 minut se na displeji zobrazí chybový symbol. Viz otázka 10.

5 Jak přesný je ovulační test Clearblue Digital?

Rozsáhlé laboratorní zkoušky prokázaly, že přesnost testu při zjišťování prudkého zvýšení hladiny LH je vyšší než 99 %. Citlivost testu je 40 mIU/ml.

6 Ještě jsem nezjistila zvýšení hladiny hormonu. Co mám udělat?

Pokud délka Vašeho cyklu kolísá o více než 3 dny, je možné, že ke zjištění prudkého zvýšení hladiny LH bude nutné provést více testů. Je také možné, že jste v tomto cyklu neoovulovala. To není neobvyklé, ale jestliže ve třech po sobě jdoucích cyklech nezjistíte prudké zvýšení hladiny LH, doporučujeme, abyste navštívila svého lékaře.

7 Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

- Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letáčích všech léků, které užíváte.
- Některé zdravotní stavy a léky mohou nepříznivě ovlivnit testování: například jestliže jste právě těhotná, nedávno jste byla těhotná, dosáhla jste menopauzy nebo trpíte polycystickým ovariačním syndromem, můžete dostat zavádějící výsledek. To může platit také v případě, že berete léky na podporu plodnosti obsahující luteinizační hormon nebo lidský choriový gonadotropin. Porade se se svým lékařem.
- Klomifen citrát nemá na testy vliv, ale může ovlivnit délku cyklu, a tím i dobu, kdy máte testy provádět. Pro pokračování v testování možná budete muset načít nové balení a použít nový držák testu a testovací tyčinku.
- Jestliže jste nedávno přestala užívat hormonální antikoncepci, Vaše cykly mohou být nepravidelné, takže je vhodné počkat, než proběhnou 2 cykly, a až pak zahájit testování.

8 Používám ovulační test Clearblue Digital několik měsíců a neotěhotněla jsem. Mohu si být jistá, že otěhotním?

Může trvat mnoho měsíců, než otěhotníte. Existuje řada důvodů, proč nemusíte otěhotnět, i když jste měla pohlavní styk v nejpłodnějším období. Je-li Vám méně než 35 let a

neotěhotněla jste, přestože se o to snažte již rok, doporučujeme, abyste se poradila se svým lékařem. Je-li Vám více než 35 let, měla byste navštívit svého lékaře po 6 měsících snahy o otěhotnění, a je-li Vám přes 40 let, navštívte svého lékaře ihned.

CHYBOVÉ ZPRÁVY

9 Na displeji se objevil blikající symbol (chyba A). Co to znamená?

Testovací tyčinku jste vysunula příliš brzy. Pokud ji nenasadíte zpět dostatečně rychle, na displeji se objeví další chybový symbol. Viz otázka 10.

10 Na displeji se objevil tento symbol (chyba B). Co to znamená?

Během testování došlo k chybě. Důvodem může být:

- Moč byla na absorpční tyčinku aplikována před vložením testovací tyčinky do držáku testu.
 - Po aplikaci moči nebyla absorpční tyčinka udržována v takové poloze, aby směřovala dolů, nebo test nebyl uložen do vodorovné polohy.
 - Bylo aplikováno příliš mnoho nebo příliš málo moči.
 - Testovací tyčinku jste vysunula příliš brzy.
- Tento symbol bude zobrazen po dobu 8 minut. Měla byste testování provést znovu s novou testovací tyčinkou a pečlivě dodržovat pokyny. Viz část „Opakované použití držáku testu“.

11 Na displeji se objevil tento symbol (chyba C). Co to znamená?

Test neproběhl podle očekávání. Příčinou může být, že jste nepostupovala podle návodu k použití. Pokud máte v balení nepoužité testovací tyčinky, **nepoužívejte** je s tímto držákem. Bude nutné, abyste provedla další test z nového balení. Dodržujte prosím pečlivě návod k použití.

12 Displej zůstal prázdný. Co to znamená?

Test neproběhl podle očekávání. Příčinou může být, že jste nepostupovala podle návodu k použití, nebo že držák testu příliš zvlhl. Pokud jste na testovací tyčinku neaplikovala moč, vysuňte ji a začněte znovu. Pokud displej zůstává prázdný, bude třeba jej vyměnit.

www.clearblue.com

Testovací tyčinky ovulačního testu Clearblue Digital použijte pouze s tímto držákem testu. Domácí ovulační test. Určeno pouze pro diagnostické použití *in vitro*. Skladujte při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je fóliový obal obsahující testovací tyčinku poškozený. Nepoužívejte testovací tyčinku po uplynutí data její expirace. Testovací tyčinky nepoužívejte opakovaně. Není určeno pro použití jako ochrana proti početí. Tento návod je určen pro model SPD číslo 505121/H.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko.
© 2015 SPD. Všechna práva vyhrazena.
Clearblue je ochranná známka společnosti SPD.
Vyrobeno v Číně.

Distribuce v ČR: Glynn Aesthetics Prague spol. s r.o., Česká republika



IVD	In vitro diagnostický zdravotnický prostředek	LOT	Kód šarže	Výrobce
	Teplotní omezení 2–30 °C		Použit do data	Viz návod k použití

Chybové symboly

Jestliže došlo k chybě, zobrazí se příslušný symbol. Viz část „Chybové zprávy“.

Ako ovulačný test Clearblue Digital funguje

Test deteguje prudké zvýšenie hladiny luteinizačného hormónu (LH) v moči. Hladina LH sa prudko zvyšuje približne 24 – 36 hodín pred vypustením vajíčka z vaječníka, čo je proces známy pod názvom **ovulácia**. Deň detekcie prudko zvýšenej hladiny LH a nasledujúci deň sú vaše najplodnejšie dni.

Dva najplodnejšie dni sa začínajú od času detekcie prudko zvýšenej hladiny LH. Pohlavný styk v týchto 48 hodinách maximalizuje vašu šancu otehotnieť.

Ak chcete začať testovanie bez poznania dĺžky svojho cyklu, odporúčame vám začať na 10. deň. Môže sa však stať, že zmeškáte čas prudkého zvýšenia hladiny LH v dôsledku príliš skorého alebo príliš neskorého začiatku testovania.

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky určte deň, kedy je vhodné začať s testovaním. Test môžete vykonať kedykoľvek v priebehu dňa, malo by však vždy ísť o rovnaký čas (mnoho žien považuje za vhodné vykonať test hneď ráno). Je dôležité, aby ste nemocili najmenej 4 hodiny pred testom. Taktiež odporúčame, aby ste pred testom nadmerne nepili.

Kedy začať s testovaním

Ak chcete zistiť dĺžku svojho cyklu, deň, keď sa cyklus začne (prvý deň menštruácie), označte ako deň č. 1 a pokračujte v počítaní až do dňa pred začiatkom ďalšej menštruácie. Počet dní bude predstavovať dĺžku cyklu.

Ak nepoznáte obvyklú dĺžku svojho cyklu, odporúčame vám pred testovaním počkať najmenej jeden menštruačný cyklus a zaznamenať si dĺžku tohto cyklu. Ak sa dĺžky vašich cyklov odlišujú o viac než 3 dni, na vypočítanie správneho dňa na vykonanie testu použijete najkratší cyklus, ktorý ste v priebehu posledných 6 mesiacov mali.

Dĺžka vášho cyklu (počet dní)	21 a menej	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 a viac
Prvý deň menštruácie označte ako deň 1 a testovať začnite v deň odporúčaný pre vašu dĺžku cyklu.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Prejdite na otázku 1.

1 Keď ste pripravená na testovanie...

- Vyberte testovaciu tyčinku z fóliového obalu. Použite ju okamžite.
- Pred aplikáciou moču na testovaciu tyčinku **musí** byť tyčinka vložená do držiaka. Postupujte podľa nasledovných krokov.




2 Odstráňte kryt

- Nájdite ružovú šípku na testovacej tyčinke.




3 Zostavenie testu

- Nájdite ružovú šípku na držiaku.
- Obe ružové šípky nasmerujte rovnakým smerom.
- Testovaciu tyčinku vsúvajte do držiaka, až kým nezapadne do správnej polohy a kým sa nezobrazí symbol označujúci, že test je pripravený.
- Test nezačínate používať, kým sa nezobrazí symbol Test pripravený.**
- Keď sa symbol Test pripravený zobrazí, vykonajte test okamžite.
- Ak sa symbol Test pripravený nezobrazí ALEBO ak tento symbol zmizne, testovaciu tyčinku vysuňte a potom opät opatrne zasuňte.
- Ak sa symbol ani potom nezobrazí, prejdite na otázku 12.

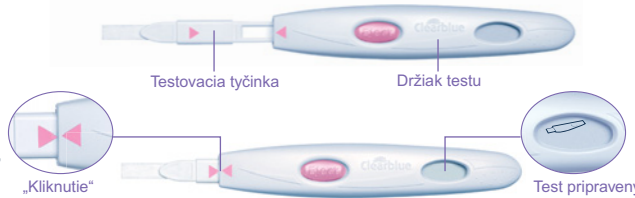

4 Vykonajte test

- Keď sa na displeji zobrazí symbol Test pripravený...
- ...**môžete** testovať moč priamo v prúde.
- Absorpčnú tyčinku **nasmerovanú nadol** vložte do prúdu moču na 5 až 7 sekúnd.
- Dajte pozor na to, aby držiak testu zostal suchý.

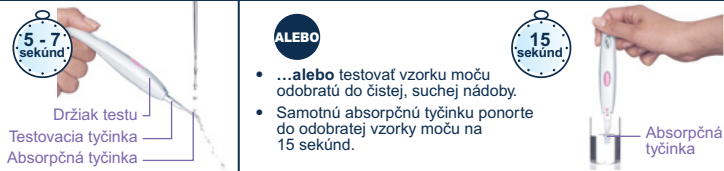

5 Počkajte

- Absorpčnú tyčinku držte nasmerovanú nadol alebo položte test vodorovne. Počas testovania nikdy nedržte absorbčnú tyčinku smerom nahor.
- Po uplynutí 20 – 40 sekúnd začne blikat symbol pripravenosti testu, čo znamená, že test prebieha.

- NEVYSÚVAJTE TESTOVACIU TYČINKU.**
- Odstáňte kryt a poutierajte moč, ak nejaky prenikol.
- Ak symbol Test pripravený nezačne blikat, prejdite na otázku 3 na druhej strane.



6 Pozrite si výsledok

- Do 3 minút sa na displeji zobrazí váš výsledok.
- Ak sa na displeji zobrazí symbol ☹️, nezistila sa prudko zvýšená hladina LH. Test zopakujte na druhý deň v tom istom čase a použijte novú testovaciu tyčinku.
- Ak sa na displeji zobrazí symbol 😊, zistila sa prudko zvýšená hladina LH a máte svoje najplodnejšie dni. Pohlavný styk v najbližších 48 hodinách maximalizuje vašu šancu otehotnieť. Počas tohto cyklu nie je potrebné vykonať testovanie.
- Po tom, ako si na displeji pozriete výsledok, **MUSÍTE** stlačiť tlačidlo na vysunutie a odstrániť testovaciu tyčinku. Platný je len výsledok na displeji držiaka testu.
- Z čiar na testovacej tyčinke nie je možné určiť výsledok testu.
- Displej zobrazuje výsledok 8 minút.
- Ak je testovacia tyčinka stále vsunutá do držiaka a displej už nič nezobrazuje, vysuňte testovaciu tyčinku a výsledok sa znova zobrazí na displeji na 2 minúty.
- Použitú testovaciu tyčinku nevsúvajte opäť do držiaka.
- Testovaciu tyčinku zlikvidujte spolu s bežným domovým odpadom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Likvidácia držiaka testu

Keď prestanete používať držiak testu, vyberte z neho všetky batérie oddelením hornej a dolnej polovice (začnite na konci, ktorý je bližšie k displeju). Vyberte všetky batérie, ktoré sa nachádzajú pod hlavným kovovým krytom. Batérie recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami. Upozornenie: Batérie nerozoberajte, nenabíjajte ani nevyhadzujte do ohňa. Zabráňte prehĺtnutiu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zvýšnú časť držiaka recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami o elektrických zariadeniach. Elektrické zariadenia nevyhadzujte do ohňa.

Opätovné používanie držiaka testu

Ak sa držiak počas vykonávania testu zamočil, dôkladne ho poutierajte. Ďalšie testovanie nie je možné, kým sa na displeji zobrazuje výsledok alebo symboly označujúce chyby. Výsledok sa zobrazuje 8 minút (alebo 2 minúty, ak ste z dôvodu prázdneho displeja vysunuli testovaciu tyčinku). Ak ste moč odobrali do nádoby, držiak testu môžete znova použiť, len čo bude displej prázdny. Ak ste pripravená opäť použiť držiak testu, postupujte podľa pokynov od kroku 1 s novou testovacou tyčinkou.

OTÁZKY A ODPOVEDE

1 Mój cyklus trvá viac ako 40 dní. Kedy môžem začať s testovaním?

Ak váš cyklus trvá viac ako 40 dní, testovať začnite 17 dní pred dňom očakávanej menštruácie.

2 Musím použiť všetky testy?

Nie. Keď test preukáže prudko zvýšenú hladinu LH, môžete prestať testovať a zvyšné testovacie tyčinky spolu s držiakom vám zostanú na testovanie počas ďalšieho cyklu, ak to bude potrebné.

3 Urobila som test, ale symbol Test pripravený nezačal blikat. Čo to znamená?

Test sa nevykonal správne. Do 10 minút po vykonaní testu sa zobrazí symbol označujúci chybu. Opakujte test s novou testovacou tyčinkou. Pozrite si otázku 10 a časť Opätovné používanie držiaka testu.

4 Urobila som test, ale nezobrazil sa žiadny výsledok. Čo to znamená?

Váš výsledok by sa mal zobrazíť do 3 minút po vykonaní testu. Ak sa do toho času nezobrazí žiadny výsledok, do 10 minút sa zobrazí symbol označujúci chybu. Prejdite na otázku 10.

5 Nakoľko je ovulačný test Clearblue Digital presný?

Rozsiahle laboratórne testy preukázali vyššiu než 99% presnosť v určovaní prudko zvýšenej hladiny LH. Citlivosť testu je 40 mIU/ml.

6 Test nepreukázal prudko zvýšenú hladinu LH. Čo mám robiť?

Ak sa dĺžky vašich cyklov odlišujú o viac ako 3 dni, na zistenie prudko zvýšenej hladiny LH budete možno potrebovať viac testov. Takisto je možné, že počas tohto cyklu ste nemali ovuláciu. Ak počas 3 za sebou nasledujúcich cyklov nezaznamenáte prudko zvýšenú hladinu LH, odporúčame vám navštíviť svojho lekára, aj keď nejde o výnimočný stav.

7 Mohli nejaké lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledky testu?

- Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.
- Niektoré lieky a zdravotné stavy môžu nepriaznivo ovplyvniť vykonanie testu: Napríklad ak ste tehotná, nedávno ste boli tehotná, ste v období menopauzy alebo máte syndróm polycystických vaječníkov, výsledky testu nemusia byť pravdivé. To isté platí, ak užívate lieky na podporu plodnosti, ktoré obsahujú luteinizačný hormón alebo ľudský choriový gonadotropín. Poradte sa s lekárom.
- Klomifénicitrát nemá na test vplyv, ale môže ovplyvňovať dĺžku vášho cyklu a tým aj dni vhodné na testovanie. Je možné, že na pokračovanie v testovaní budete musieť použiť nové balenie, nový držiak na test a nové testovacie tyčinky.
- Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu, váš cyklus môže byť nepravidelný a s testovaním by ste mali začať až po ukončení dvoch cyklov.

8 Používala som ovulačný test Clearblue Digital niekoľko mesiacov, a napriek tomu som neotehotnela. Je otehotnenie isté?

Otehotnieť môže trvať aj niekoľko mesiacov. Existuje veľa dôvodov, prečo ste neotehotneli napriek tomu, že ste mali pohlavný styk počas svojich najplodnejších dní. Ak máte menej ako 35 rokov a po dobu 12 mesiacov sa vám nepodarilo otehotnieť, odporúčame vám

navštíviť lekára. Ak máte viac ako 35 rokov, lekára navštívte, ak sa vám nepodarilo otehotnieť po dobu 6 mesiacov, a ak máte viac ako 40 rokov, navštívte lekára bez ďalšieho čakania.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

9 Na displeji sa zobrazil blikajúci symbol (Chyba A). Čo to znamená?

Testovacia tyčinka sa vysunula príliš skoro. Ak sa nezasunuje včas späť, zobrazia sa ďalšie symboly označujúce chyby. Prejdite na otázku 10.

10 Na displeji sa zobrazil tento symbol (Chyba B). Čo to znamená?

Počas testovania sa objavila chyba. Možné dôvody:

- Moč sa aplikoval na absorbčnú tyčinku predtým, ako bola testovacia tyčinka vsunutá do držiaka.
- Po aplikácii moču nebola absorbčná tyčinka v polohe smerujúcej nadol alebo test nebol položený vodorovne.
- Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču.
- Testovacia tyčinka bola vysunutá príliš skoro.

Symbol sa bude zobrazovať 8 minút. Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dbajte na dodržanie pokynov. Prejdite na časť Opätovné používanie držiaka testu.

11 Na displeji sa zobrazil tento symbol (Chyba C). Čo to znamená?

Test neprebehol podľa očakávania. Mohlo sa to stať preto, že ste nedodržali návod na použitie. Ak v balíčku máte nepoužitú testovaciu tyčinku, **neponúčajte** ich s týmto držiakom. Bude potrebné použiť test z nového balíčka. Postupujte presne podľa návodu na použitie.

12 Displej zostal prázdny. Čo to znamená?

Test neprebehol podľa očakávania. Mohlo sa to stať preto, že ste nedodržali návod na použitie alebo sa držiak počas testovania priveľmi zamočil. Ak ste na testovaciu tyčinku neaplikovali moč, vysuňte ju a začnite testovanie odznova. Ak displej zostane prázdny, testovaciu tyčinku bude potrebné vymeniť.

www.clearblue.com

Držiak používajte len na testovacie tyčinky dodávané s ovulačným testom Clearblue Digital. Ovulačný test na domáce testovanie. Iba na diagnostické použitie *in vitro*. Skladujte pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí. Testovaciu tyčinku nepoužívajte, ak je fóliový obal poškodený. Nepoužívajte testovaciu tyčinku po uplynutí dátumu expirácie. Testovacie tyčinky nepoužívajte opakovane. Nie je vhodné ako antikoncepcia. Tento návod sa vzťahuje na model SPD č. 505121/H

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajčiarsko.
© 2015 SPD. Všetky práva vyhradené.
Clearblue je ochranná známka spoločnosti SPD.
Vyrobené v Číne.

Distribúcia v SR: Glynn Brothers
Chemicals Slovakia, spol. s r.o.



IVD	In vitro diagnostický zdravotnícky prostriedok	LOT	Číslo šarže	Výrobca
	Teplotné obmedzenie 2 – 30 °C		Dátum najneskoršej spotreby	Prečítajte si návod na použitie

Dátum poslednej revízie textu: 02/2015

Symboly označujúce chyby

V prípade odhalenia chyby sa zobrazí príslušný symbol. Pozrite si časť Chybové hlásenia.

Cum funcționează testul de ovulație Clearblue Digital

Testul funcționează prin detectarea creșterii nivelului hormonului luteinizant (LH) (deviație) în urina dumneavoastră. Deviația LH se înregistrează cu aproximativ 24 – 36 de ore înainte de eliberarea unui ovul din ovarele dumneavoastră, proces cunoscut sub numele de **ovulație**. Nivelul cel mai ridicat de fertilitate se înregistrează în ziua în care este detectată deviația LH și în ziua următoare.

Cele mai fertile două zile încep din momentul detectării deviației LH. Puteți avea contact sexual oricând în decursul respectivelor 48 de ore pentru a maximiza șansele de a rămâne însărcinată.

Dacă doriți să începeți testarea fără a cunoaște durata ciclului menstrual, vă recomandăm să începeți testarea în ziua 10. Cu toate acestea, este posibil să ratați deviația LH, întrucât ați început să testați prea devreme sau prea târziu.

Utilizați tabelul de mai jos pentru a stabili ziua în care ar trebui să începeți testarea. Puteți efectua testul oricând, pe parcursul zilei, dar aproximativ la aceeași oră în fiecare zi (pentru cele mai multe dintre femei, cel mai comod este să faceți testul dimineața, imediat după trezire). Este important să nu fi urinat timp de cel puțin 4 ore înainte de testare și ar trebui să evitați consumul excesiv de lichide înainte de efectuarea testului.

Când să începeți testarea

Pentru a stabili durata ciclului dumneavoastră menstrual, considerați prima zi de menstruație (prima zi completă de sângerare) ca ziua 1 și continuați să numărați până la ziua de **dinaintea** începerii următoarei menstruații. Numărul de zile rezultat reprezintă durata ciclului dumneavoastră menstrual.

Dacă nu știți durata obișnuită a ciclului menstrual, vă recomandăm să așteptați măcar un ciclu menstrual și să notați durata acestuia, înainte de a utiliza testul. Dacă ciclul dumneavoastră menstrual variază cu mai mult de 3 zile, luați în considerare cea mai scurtă durată din ultimele 6 luni pentru a stabili când să începeți testarea.

Durata ciclului menstrual (zile)	21 sau mai puține	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 sau mai multe
Considerați prima zi de menstruație ca ziua 1 și începeți testarea în ziua indicată sub durata ciclului dumneavoastră menstrual.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Consultați Întrebarea 1.

1 Când sunteți pregătită de testare...

- Scoateți bețișorul de test din folie. Utilizați imediat.
- Înainte de a aplica urină pe bețișorul de test, acesta **trebuie** introdus în suportul de test. Urmați etapele de mai jos.




2 Îndepărtați capacul

- Localizați săgeata roz de pe bețișorul de test.



3 Asamblați testul


- Localizați săgeata roz de pe suportul de test.
- Aliniați ambele săgeți roz.
- Introduceți bețișorul de test în suportul de test până când se fixează în poziție cu un clic și se afișează simbolul „test pregătit”.
- Nu utilizați înainte** de afișarea simbolului „test pregătit”.
- Când apare simbolul „test pregătit”, efectuați testul imediat.
- Dacă nu apare simbolul „test pregătit” SAU dacă a dispărut, ejectați bețișorul de test și introduceți-l din nou, cu atenție.
- Dacă simbolul tot nu apare, consultați Întrebarea 12.

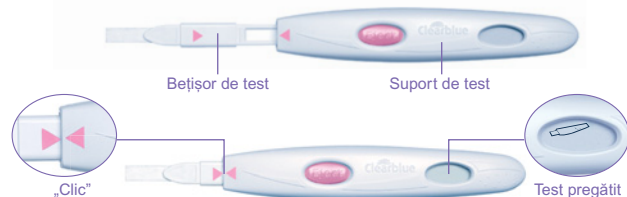

4 Efectuați testul

Cu simbolul „test pregătit” pe afișaj...

- Fie testați direct în jetul de urină.
- Așezați doar sonda absorbantă, **îndreptată în jos** în jetul de urină, timp de 5 – 7 secunde.
- Aveți grijă să nu udați suportul de test.

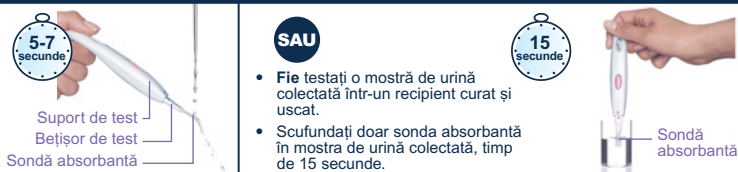

SAU


- Fie testați o mostră de urină colectată într-un recipient curat și uscat.
- Scufundați doar sonda absorbantă în mostra de urină colectată, timp de 15 secunde.



5 Așteptați

- Țineți sonda absorbantă îndreptată în jos sau așezați testul pe o suprafață plană. Pe parcursul efectuării testului, nu țineți niciodată testul cu sonda absorbantă îndreptată în sus.
- Simbolul „test pregătit” va începe să clipească după 20 – 40 de secunde, indicând că testul funcționează.

- NU EJECTAȚI BEȚIȘORUL DE TEST.**
- Puneți capacul la loc, apoi ștergeți excesul de urină.
- Dacă simbolul „test pregătit” nu începe să clipească, consultați Întrebarea 3 de pe verso.

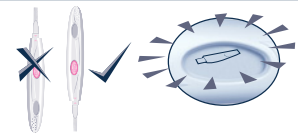

6 Consultați rezultatul

- În decurs de 3 minute, pe afișaj va apărea rezultatul.



- Dacă rezultatul este ☺, nu a fost detectată deviația LH. Testați din nou în ziua următoare, la aceeași oră, utilizând un nou bețișor de test.



- Dacă rezultatul este ☹, a fost detectată deviația LH și sunteți în cea mai fertilă perioadă. Puteți avea contact sexual oricând în decursul următoarelor 48 de ore pentru a maximiza șansele de a rămâne însărcinată. Nu este nevoie să continuați testarea în acest ciclu menstrual.

- Odată ce ați citit rezultatul, **TREBUIE** să apăsați butonul de ejectare și să îndepărtați bețișorul de test. Rezultatul testului poate fi citit doar pe afișajul suportului de test.
- Nu puteți stabili rezultatul pe baza oricărui linii pe care le observați pe bețișorul de test.
- Rezultatul va rămâne pe afișaj timp de 8 minute.
- Dacă bețișorul de test este încă în suport și afișajul este gol, ejectați bețișorul de test și rezultatul va apărea din nou, timp de 2 minute.
- Nu introduceți din nou un bețișor de test folosit.
- Aruncați bețișorul de test împreună cu deșeurile menajere.

Simboluri de eroare

Dacă se înregistrează o eroare, se va afișa un simbol. Consultați „Mesaje de eroare”.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Aruncarea suportului de test

După ce ați încheiat utilizarea suportului de test, îndepărtați toate bateriile prin separarea celor două jumătăți, de sus și de jos, începând cu capătul mai apropiat de afișaj. Scoateți toate bateriile de sub carcasa metalică centrală. Aruncați bateriile conform procedurii de reciclare corespunzătoare. Precauții: Nu dezasamblați, nu reîncărcați bateriile și nu le aruncați în foc. Nu înghițiți. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Aruncați restul de piese din suport, în conformitate cu procedura de reciclare corespunzătoare pentru echipamente electrice. Nu aruncați dispozitivele electrice în foc.

Reutilizarea suportului de test

Dacă suportul de test este stropit în timpul testării, ștergeți-l. Nu poate fi efectuat un nou test dacă pe afișaj apare rezultatul testului dumneavoastră sau orice simboluri de eroare. Acestea vor fi afișate timp de 8 minute (sau 2 minute, dacă afișajul este gol și tocmai ați ejectat bețișorul de test). Dacă ați colectat urină, puteți utiliza din nou suportul de test, de îndată ce afișajul este gol. Când sunteți gata să utilizați suportul de test din nou, repetați instrucțiunile de la pasul 1, utilizând un nou bețișor de test.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

1 Durata ciclului meu menstrual este mai mare de 40 de zile. Când ar trebui să încep testarea?

Dacă durata ciclului dumneavoastră menstrual este mai mare de 40 de zile, începeți testarea cu 17 zile înainte de data în care este așteptată următoarea menstruație.

2 Trebuie să utilizez toate testele?

Nu. Puteți întrerupe testarea după ce ați detectat deviația LH și puteți să păstrați bețișoarele de test rămase și suportul de test pentru utilizare în ciclul menstrual următor, dacă este nevoie.

3 Am efectuat testul, dar simbolul „test pregătit” nu a început să clipească. Ce înseamnă acest lucru?

Testul nu a fost efectuat corect. Un simbol de eroare va apărea în decurs de 10 minute de la testare. Trebuie să efectuați testul din nou, utilizând un bețișor de test nou. Consultați Întrebarea 10 și „Reutilizarea suportului de test”.

4 Am efectuat un test, dar nu a apărut niciun rezultat. Ce înseamnă acest lucru?

Rezultatul dumneavoastră ar trebui să se afișeze în decurs de 3 minute de la efectuarea testului. Dacă nu apare niciun rezultat, va apărea un simbol de eroare în decurs de 10 minute. Consultați Întrebarea 10.

5 Ce exactitate are testul de ovulație Clearblue Digital?

Studiile clinice de laborator extinse au demonstrat o exactitate de peste 99% a testului în detectarea deviației LH. Sensibilitatea testului este de 40 mIU/ml.

6 Nu am detectat încă o deviație a hormonului. Cum ar trebui să procedez?

Dacă ciclul dumneavoastră menstrual variază cu mai mult de 3 zile, este posibil să fie nevoie să utilizați mai multe teste pentru a detecta deviația LH. De asemenea, este posibil să nu fi ovulat în acest ciclu menstrual. Acest lucru nu este neobișnuit, dar vă recomandăm să consultați medicul dacă nu observați o deviație LH timp de 3 cicluri menstruale consecutive.

7 Există medicamente sau probleme medicale ce pot afecta rezultatul?

- Citiți întotdeauna instrucțiunile producătorului medicamentului pe care îl luați înainte de efectuarea unui test.
- Anumite probleme medicale și medicamente pot afecta în mod negativ performanța testului: de exemplu, dacă sunteți, de fapt, însărcinată, ați fost însărcinată de curând, ați ajuns la menopauză sau aveți sindromul ovarului polichistic, este posibil să obțineți un rezultat incorect. Această situație poate apărea și dacă urmați un tratament de fertilitate cu hormon luteinizant sau gonadotropină corionică umană. Discutați cu medicul.
- Tratamentele cu clomifen citrat nu afectează rezultatul testelor, dar pot afecta durata ciclului menstrual și, prin urmare, perioada în care trebuie să efectuați testele. Poate fi nevoie să deschideți un nou pachet și să utilizați noul suport de test și bețișoarele de test noi pentru a continua testarea.
- Dacă ați întrerupt de curând contraceptivele hormonale, este posibil ca ciclurile menstruale să fie neregulate, astfel că vă recomandăm să așteptați 2 cicluri menstruale înainte de a efectua testul.

8 Am utilizat testul de ovulație Clearblue Digital timp de câteva luni și nu am rămas însărcinată. Pot fi sigură că voi rămâne însărcinată?

Poate dura mai multe luni până rămâneți însărcinată. Există multe motive din cauza cărora

este posibil să nu rămâneți însărcinată, chiar dacă ați avut contact sexual în cea mai fertilă perioadă. Vă recomandăm să consultați medicul dacă aveți sub 35 de ani și nu ați rămas însărcinată după 12 luni de încercare. Dacă aveți peste 35 de ani, consultați doctorul dumneavoastră (sau medicul) după 6 luni de încercare și, dacă aveți peste 40 de ani, consultați medicul imediat.

MESAJE DE EROARE

9 Pe afișaj a apărut un simbol intermitent (Eroare A). Ce înseamnă acest lucru?



Bețișorul de test a fost ejectat prea curând. Dacă nu este reintrodus suficient de rapid, va apărea un alt simbol de eroare. Consultați Întrebarea 10.

10 Pe afișaj a apărut acest simbol (Eroare B). Ce înseamnă acest lucru?



A apărut o eroare în timpul testării. Este posibilă una dintre următoarele situații

- Urina a fost aplicată pe sonda absorbantă înainte ca bețișorul de test să fie introdus în suportul de test.
- Sonda absorbantă nu a fost ținută îndreptată în jos sau bețișorul de test nu a fost așezat pe o suprafață plană după aplicarea urinei.
- A fost aplicată prea multă sau prea puțină urină.

Bețișorul de test a fost ejectat prea curând. Simbolul va fi afișat timp de 8 minute. Trebuie să testați din nou, utilizând un test nou și având grijă să respectați instrucțiunile. Consultați „Reutilizarea suportului de test”.

11 Pe afișaj a apărut acest simbol (Eroare C). Ce înseamnă acest lucru?



Testul nu s-a desfășurat conform așteptărilor. Acest lucru se poate întâmpla dacă nu au fost respectate instrucțiunile. Dacă aveți bețișoare de test nefolosite în pachet, nu le utilizați cu acest suport. Va trebui să efectuați un alt test, dintr-un pachet nou. Respectați cu atenție instrucțiunile de utilizare.

12 Afișajul a rămas gol. Ce înseamnă acest lucru?



Testul nu s-a desfășurat conform așteptărilor. Acest lucru se poate întâmpla dacă instrucțiunile nu au fost respectate sau dacă suportul de test s-a udat prea tare. Dacă nu ați aplicat urină pe bețișorul de test, ejectați-l și începeți din nou. Dacă afișajul rămâne gol, va trebui înlocuit.

www.clearblue.com

Utilizați doar bețișoare de test pentru testul de ovulație Clearblue Digital cu acest suport de test. Test de ovulație la domiciliu. Doar pentru diagnosticare *in vitro*. Păstrați la temperatura camerei. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu utilizați dacă folia în care este ambalat bețișorul de test este deteriorată. Nu utilizați un bețișor de test după data de expirare. Nu reutilizați bețișoarele de test. Nu este destinat utilizării ca metodă contraceptivă. Aceste instrucțiuni se referă la dispozitivul SPD, modelul cu numărul 505121/H

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.
© 2015 SPD. Toate drepturile rezervate.
Clearblue este o marcă comercială a SPD.
Produs în China.

Distribuit de: INTERBRANDS M&D, Sos. Viilor, Nr. 14, Sector 5, București, România.
Tel: 021 336 2815.



IVD	Dispozitiv medical pentru diagnosticare <i>in vitro</i>	LOT	Cod lot	Producător
2°C - 30°C	Limită de temperatură 2°C – 30°C		Data de expirare	Consultați instrucțiunile de utilizare