

Tehotenský test Rýchla detekcia

- Vyššia ako 99 % presnosť pri určovaní tehotenstva odo dňa očakávanej menštruácie.
- **Pred vykonaním testu si starostlivo prečítajte tento príbalový leták.**

1 Predtým, ako začnete

Môže byť užitočné pripraviť si hodinky na sledovanie času počas testovania. Test môžete vykonať kedykoľvek v priebehu dňa odo dňa očakávanej menštruácie.

2 Vykonajte test

Keď ste pripravená na testovanie, odstráňte fóliový obal a zložte kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.

Môžete testovať priamo v prúde moču **alebo** sa môže testovať vzorkou moču odobratú do čistej, suchej nádoby.

- Špičku meniacu farbu nasmerovanú nadol vložte do prúdu moču **alebo** do odobratej vzorky moču na celych **5 sekúnd**, ako je znázornené na obrázku.

- Špička meniacu farbu sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbovala moč.

- **Špičku meniacu farbu ponechajte v moči celych 5 sekúnd.**



- Špičku meniacu farbu držte nasmerovanú nadol alebo testovaciu tyčinku položte do vodorovnej polohy, až pokiaľ sa v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara a nebudete si môcť pozrieť výsledok.
- Kryt môžete znova nasadiť.
- Ak sa špička meniacu farbu nesfarbí celá na ružovo, pozrite si otázku č. 5.



ČAKAJTE 3 MINÚTY.
Keď sa začnú objavovať modré čiary znamená to, že test začína pracovať.


3 Pozrite si výsledok

Výsledok si môžete pozrieť v okienku s výsledkom.

Pri odčítaní výsledku sa v kontrolnom okienku musí zobrazovať modrá čiara. Táto čiara znamená, že test prebehol úspešne.

Výsledok preukazujúci „Ste tehotná“ sa môže zobrazovať o 1 minútu, keď sa test vykonáva v deň menštrujacej menštruácie (t. j. po dni očakávanej menštruácie).

Na potvrdenie výsledku „Nie ste tehotná“, počkajte 3 minúty (pozrite si otázku č. 8). Ak sa v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, test neprebehol úspešne (pozrite si otázku č. 6).

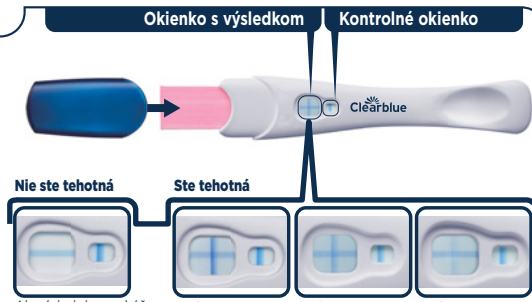

Nie ste tehotná

Ak výsledok preukáže „**Nie ste tehotná**“, pozrite si otázku č. 10.

Ste tehotná

- Ak výsledok preukáže „**Ste tehotná**“, pozrite si otázku č. 11.
- Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, pozrite si otázku č. 7.

Test označuje „Ste tehotná“, aj v tom prípade, že čiary tvoriace symbol „+“ nie sú rovnako tmavé.

DÔLEŽITÉ! Výsledok odčítajte do **10 minút** po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času neberte do úvahy.

Otázky a odpovede

1 Nakoľko je tehotenský test Clearblue presný?

Test Clearblue dosahuje v laboratórnych testoch presnosť vyššiu ako 99 % pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie.

2 Ako test Clearblue funguje?

V tehotenstve ľudské telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu tehotenstva. Test Clearblue Rýchla detekcia dokáže v moči odhaliť aj drobné množstvo tohto hormónu (citlivosť testu je 25 mIU/ml).

3 Nevie, kedy má dostať najbližšiu menštruáciu. Ako zistím, či vykonávam test v správnom čase?

Na určenie dňa očakávanej menštruácie vypočítajte dĺžku vášho bežného cyklu tak, že spočítate počet dní od prvého dňa menštruácie až po deň pred začatím ďalšej menštruácie.

- Ak máte nepravidelny cyklus, mali by ste brať do úvahy najdlhší cyklus za posledné mesiace.

Ak je výsledok „Nie ste tehotná“, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste, pozrite si otázku č. 10.

4 Môžu nejaké lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

- **Pred** vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k akýmkoľvek liekom, ktoré užívate.
- Lieky vplyvajúce na plnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže mať za následok nesprávne určenie výsledku „Ste tehotná“).
- Iné terapie plnosti, ako napr. klomifénitrát, lieky proti bolesti a hormonálna antikoncepcia (napr. antikoncepcné tabletky), by na výsledok testu nemali mať žiadny vplyv.
- Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak používate klomifénitrát či iné prostriedky na zvýšenie plnosti, váš cyklus môže byť nepravidelný a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
- Ak ste boli nedávno tehotná (aj v prípade nedonosenia), test môže nesprávne určiť výsledok „Ste tehotná“.
- Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a iné veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.
- Ak test preukáže „Ste tehotná“, a vy neskôr zistíte, že nie ste, môže ísť o prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva.
- Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte to so svojim lekárom.

5 Použila som tehotenský test, ale špička meniacu farbu sa nesfarbila celá na ružovo. Čo mám robiť?

Ak sa nesfarbila celá špička meniacu farbu, je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, pozrite si otázku č. 6.

6 Použila som tehotenský test, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:

- Po aplikácii moču nebola špička meniacu farbu nasmerovaná nadol alebo testovacia tyčinka nebola položená do vodorovnej polohy.
- Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču.

Je potrebné podržať špičku v moči 5 sekúnd.

Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať do čistej, suchej nádoby a len do nej vložte špičku meniacu farbu na 5 sekúnd.

7 Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

- Test označuje „Ste tehotná“, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „+“.
- Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podob, avšak čiary, ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku by mali mať podobnú hrúbku (pozrite si obrázky A - C).

Obrázok A

Toto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní po dni omeškanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.

Obrázok B

K takejto situácii môže dôjsť, keď ste tehotná a test vykonávate v deň alebo zhruba v deň omeškanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG pomerne nízka.

Obrázok C

Aj ak je výsledok slabšie viditeľný, výsledok stále preukazuje, že ste tehotná.

Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

Ďalšie kroky, informácie a všeobecné rady týkajúce sa tehotenstva nájdete na našej webovej stránke: www.clearblue.com

Na samostatnej v domácom prostredí. Iba na diagnostické použitie *in vitro*. Nie je určený na vnútorné použitie. Nepoužívajte opakovane. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 2 - 30 °C. Ak test skladujete v chladničke, pred použitím ho vyberte a počkajte minimálne 30 minút, kým nedosiahne izbovú teplotu. Nepoužívajte, ak je fóliový obal poškodený. Nepoužívajte po dátume najneskoršej spotreby. Zlikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Pomôcku nerozoberajte. Obsahuje malé časti. Žiadna časť tejto pomôcky nie je vhodná na konzumáciu. V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

	Výrobca		Nepoužívajte opakovane
	Číslo šarže		Diagnostická zdravotnícka pomôcka na použitie <i>in vitro</i>
	Dátum najneskoršej spotreby		Teplotné obmedzenie 2 - 30 °C

www.clearblue.com

☒ Distribúcia v SR: Glynn Brothers Chemicals Slovakia spol. s r.o., Slovensko

☒ SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Švajčiarsko
Clearblue je ochrannou známkou spoločnosti SPD.
© 2019 SPD. Všetky práva vyhradené.